

# NEXTY

独自の英知と技術を結集した次世代マイクロピペット。  
新開発マイクロピペッター "ネクスティ" から

## 8連が登場!!

### 新製品

# デモ受付中

チップフィット、スピード  
クセになる感覚  
是非、ご体験ください。

デモ申し込みごとにチップサンプル1ラックプレゼント!

(120-204C/120-207C/1201-705Y)

チップサンプルと一緒にお試しください。



ホームページから申し込みください。  
<http://www.watson.co.jp>



#### 3倍速ターボダイヤル

容量設定・変更する時にプッシュボタンの35回転を1回転で行うことが出来ます。片手で操作出来るので、スピーディーな容量設定を可能にします。大きな容量変更を行うときに便利なダイヤルです。



#### 大きなプッシュボタン

親指にかかる負担を削減した独特のキノコ状デザインを採用。最小目盛(1/1000)毎の容量設定ダイヤルにもなっています。容量別に色分けされたカラーコードの役割も果たしています。新スプリング機構の設計により、極めて軽いストロークを実現。




#### ロックレバー

プッシュボタンとターボダイヤルの回転をロックします。操作中の容量設定のズレを防ぎます。



#### 8連マルチフィットシステム

独立サスペンション搭載により、8レーン全てにサスペンションが搭載されており、全てのノズルコーンが独立可動!! これにより、チップ装着時の加重を均一に伝え、チップ装着のバラつきを少なくし、装着ミスストレスを軽減します。

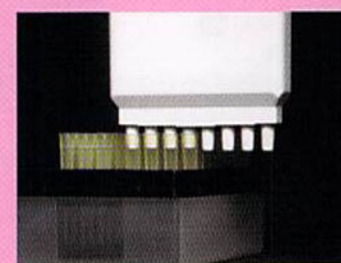


#### 左右選択式イジェクトボタン

親指の負担と無駄な動き削減する大型ボタンでユニークな左右選択式です。右手用が標準ですが、オプションとして左手用パーツをご用意出来ます。



#### 見やすいデジタル表示

見やすい3桁+目盛り表示。窓が反対側にある左手用特注品もご用意出来ます。

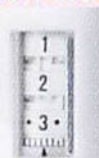

#### 手になじむボディデザイン

握りやすくしっかりグリップ出来ます。



品番	品名	最小目盛	測定容量	正確度	精密度	適合チップ	入数	価格
NT-810	NEXTY 8連マルチチャンネルピペッター 1~10μl	0.01μl	1μl 10μl	±8.0% ±2.0%	±5.0% ±1.0%	204C/207C	1本	48,000円
NT-8200	NEXTY 8連マルチチャンネルピペッター 20~200μl	0.1μl	20μl 200μl	±8.0% ±1.0%	±1.0% ±0.5%	705Y/703Y/703C/503Y	1本	48,000円